

aams.介護 Android説明書

アプリ概要

aamsにてアラート発生時、アラートをお知らせするアプリケーション

仕様

項目	内容
OS	Android10～16
ネットワーク	aamsサーバーと同じネットワーク
対象デバイス	AQUOS wish

アプリケーション運用時注意点

- aamsサーバー(以下、「サーバー」という)と同じネットワークに接続されていない場合は、アラート通知が届きません
- 通知一覧にaams4アプリケーション(以下、「アプリ」という)のメッセージが無い、または、メッセージが「aams接続中」以外の時はサーバーに接続できていないため、アラート通知が届きません
- aamsブラウザ(以下、「ブラウザ」という)にてグループ管理の情報を変更した場合は、アプリにて一度ログアウトし、再ログインをしてください
- アプリのグループとブラウザで使用しているグループは同じものを選択してください
- 管理者のログインはブラウザの管理者ログインと同じものを使用してください
- 本アプリはaams version 4.0と連携いたします
- 本アプリはaams version 3.5.x以下のバージョンとは連携できません

インストール&初期設定

1. 「aams4」アプリケーション.apkをインストールする
または、GooglePlayから「aams4」アプリケーションをダウンロード



2. アプリケーション起動



アプリアイコンをクリックし、アプリケーションを起動します。

※ サーバーと同じネットワークにWi-Fi接続してください

3. サーバー接続設定

i. aamsサーバーアドレスを入力する

aamsサーバーの接続情報を登録してください

aamsサーバーアドレス

http://192.168.100.1

アプリを使用する範囲のSSIDを登録してください

SSID  最大登録数:5

aams.ap01 

ii. 普段業務を行なっている範囲のSSIDを登録する

a. SSID追加ボタンを押下する

アプリを使用する範囲のSSIDを登録してください


SSID  最大登録数:5

aams.ap01 

b. アプリの使用時のみを押下する(一度許可されていれば次回以降は表示されません)



c. 接続しているSSIDが入力されていることを確認し、追加を押下する

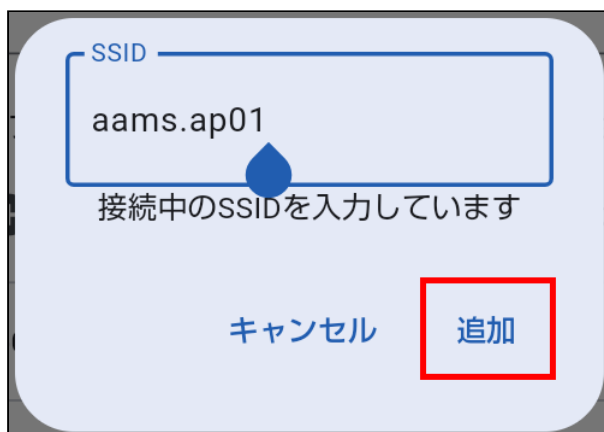


iii. 保存ボタンをタップする


※ 接続エラーが発生した場合は、入力内容、Wi-Fi接続環境、サーバーの状態を確認してください

4. PUSH通知の許可を選択する

※ **Android13以上の時に操作します**

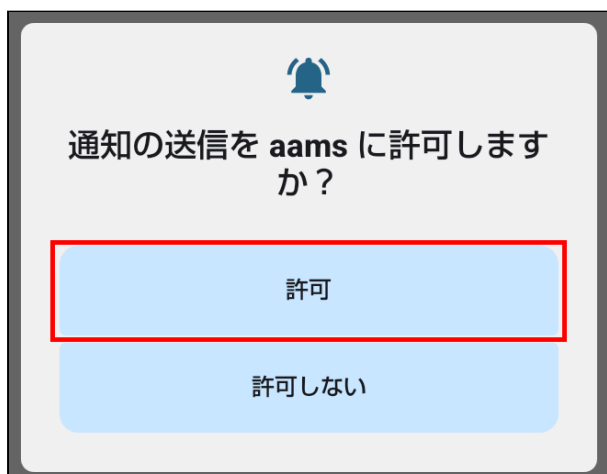

5. バックグラウンドでの常時実行の許可を選択する

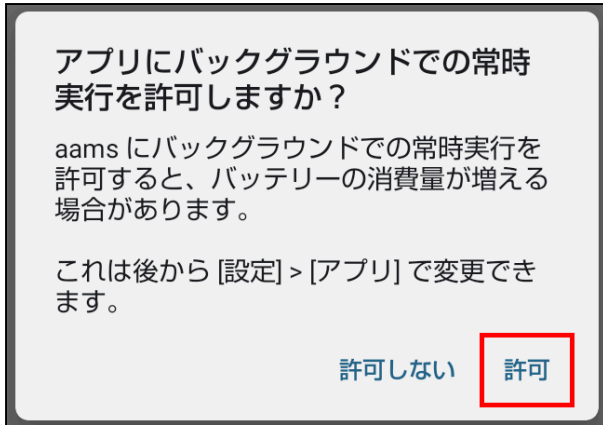

アプリケーションの利用

1. アプリケーション起動




アプリアイコンをクリックし、アプリケーションを起動します。

※ サーバーと同じネットワークにWi-Fi接続してください

2. グループ選択

ブラウザにて登録されているグループと同じグループが表示されます。
見守り対象のグループを選択してください。

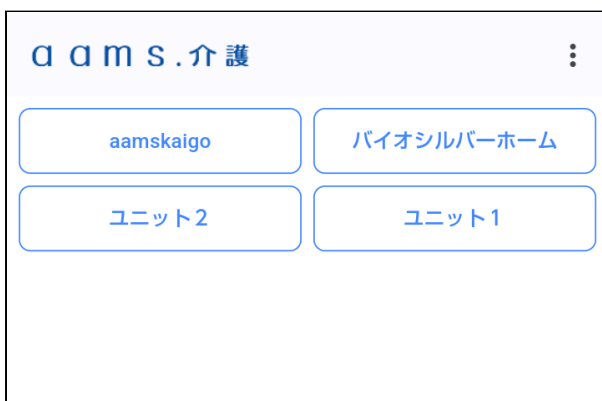

3. 管理者ログイン


1. グループ選択画面からオプションメニューを選択します。




2. メニューからログインを選択します。



3. 管理者のログインIDとパスワードを入力し、ログインボタンをタップします。

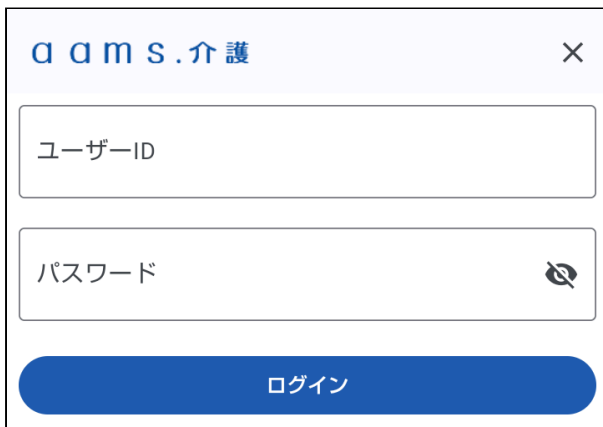


4. 見守り

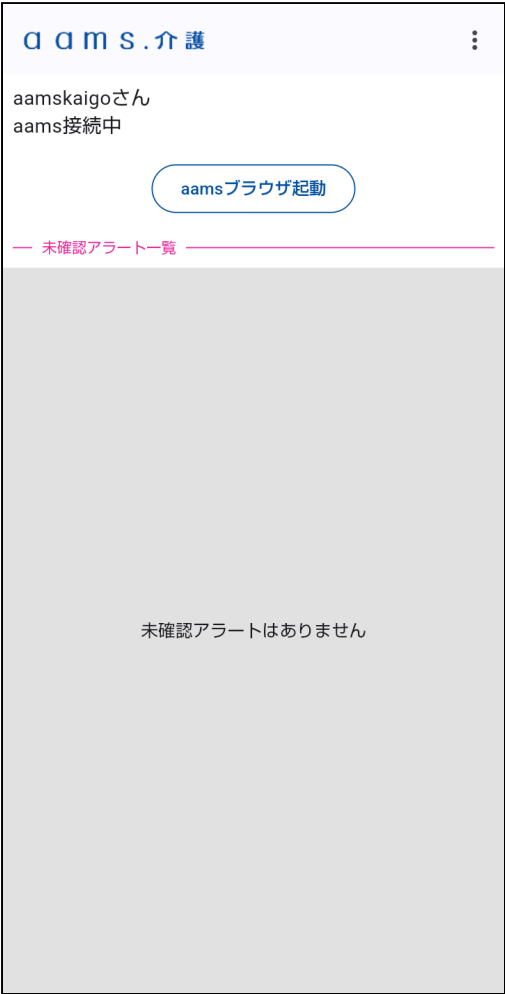通常時	アラート発生時
	


画面説明

1. ログイン状態表示

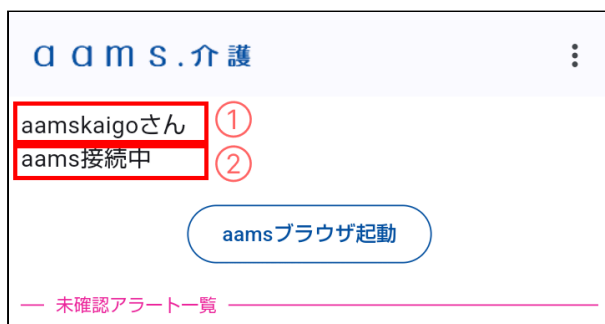

- ① ログイン者名
- ② 接続状態

2. aamsブラウザ起動ボタン

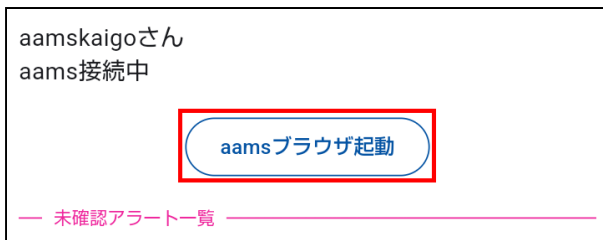

ブラウザアプリを起動し、aamsのWEBページを表示します。




3. 未確認アラート情報




- ① 利用者名
- ② 発生アラート一覧
- ③ カメラボタン(連携カメラの映像を表示します)
- ④ アラート確認ボタン(サーバーに確認したことを通知します)

ログアウト

① 画面上のオプションメニューを選択します

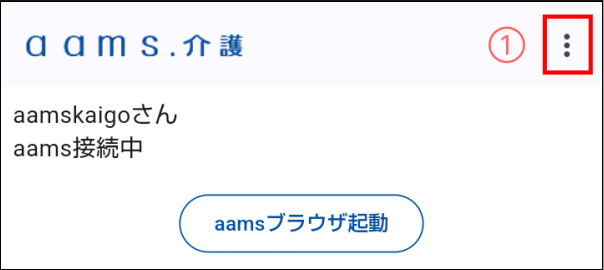

② ログアウトを選択します

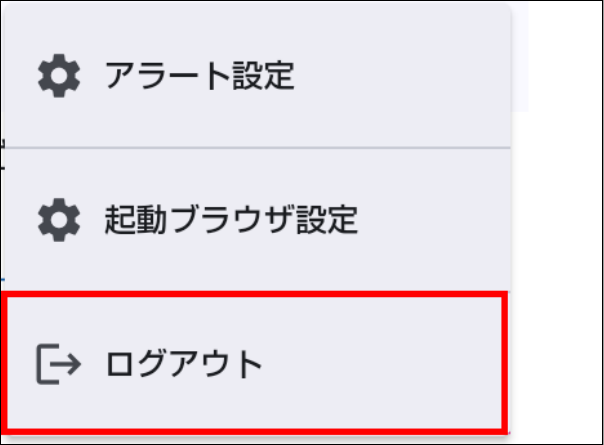

③ グループ選択画面に戻ります

通知の表示

- 以下の状態を通知いたします

状態	通知
サーバー接続状態	
サーバー接続異常状態	
アラート通知状態	

5. 接続設定の登録

1. グループ選択画面上部のオプションメニューを選択します。



2. 接続設定を選択します。



3. サーバーと接続を行う際の情報を登録します

aamsサーバーの接続情報を登録してください

aamsサーバーアドレス

http://192.168.100.1

アプリを使用する範囲のSSIDを登録してください

SSID  最大登録数:5

aams.ap01 

i. SSID

ご利用の端末がサーバーに接続する際に使用するSSIDを登録します。


ii. aamsサーバーアドレス

サーバーのアドレスを登録します。


6. アラート設定の登録

アラート設定は設定後発生したアラートから反映されます。

1. 見守り画面上部のオプションメニューを選択します。

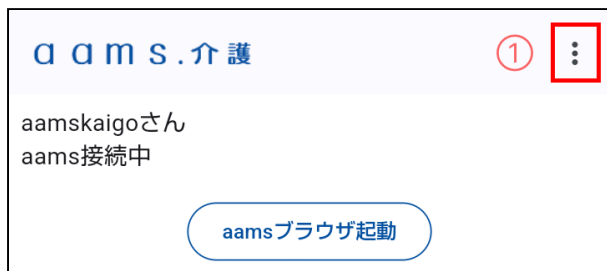

2. アラート設定を選択します。

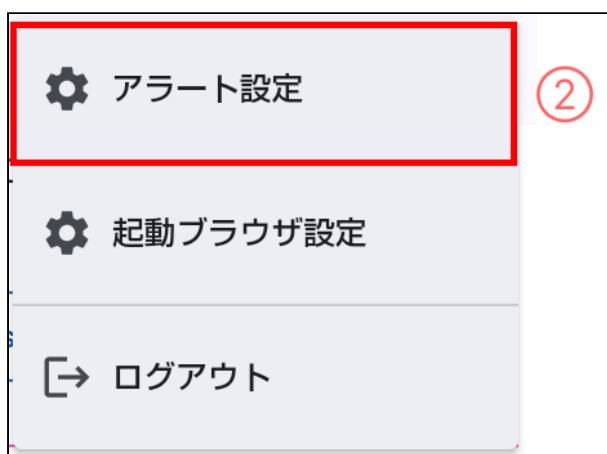



3. アラートの設定を登録します。



i. 通知時間

アラート通知音の再生時間の設定を行います。

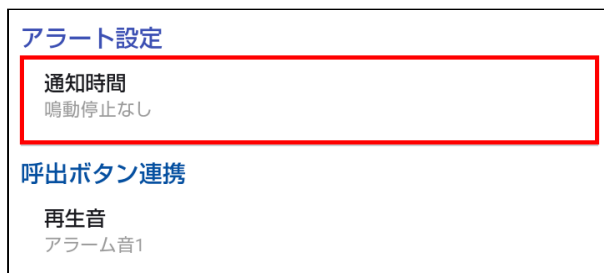

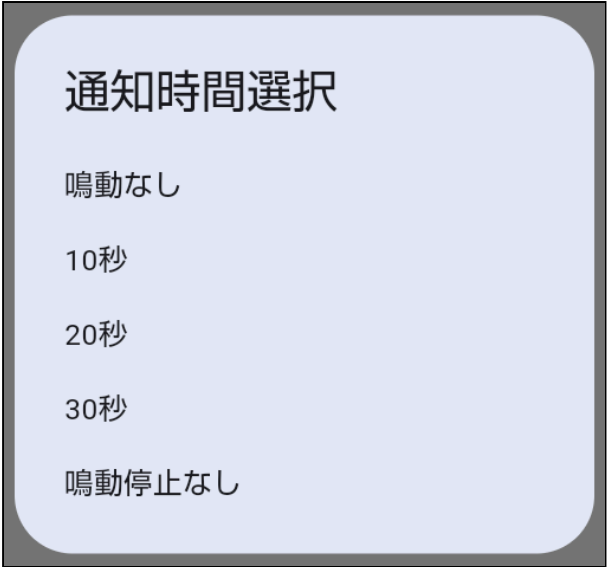

アラート音の音量設定について以下の場所を設定してください。

対象	ロック時 ホーム画面時	アプリ画面時
設定場所	設定 > 着信音とバイブレーション	サイドボタンの音量
イメージ		

- ii. 呼出ボタン連携 再生音
- ナースコールボタンを押した時のアラート音の設定を行います。

アラート設定

通知時間
鳴動停止なし

呼出ボタン連携

再生音
アラーム音1

再生音選択

アラーム音1

アラーム音2

警告音

警告音2

鳥声

目覚まし音

通知音の注意

「警告音 2」はVer1.1.0から対応しています
アプリがVer1.1.0未満のバージョンの場合aamsブラウザにて警告音 2 を設定していると、アラーム音 1 が再生されます

通知が表示されないと思ったら

1. Android13以上の端末では、通知の権限を確認

1. 設定を起動する




2. アプリを選択する




3. 「aams4」を選択する

4. 権限を選択する

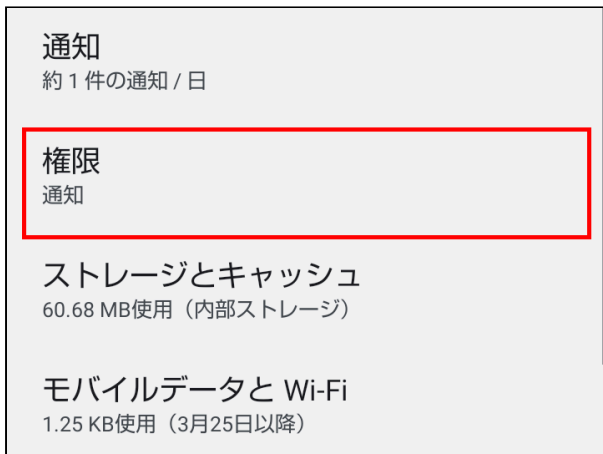


5. 通知を許可にする

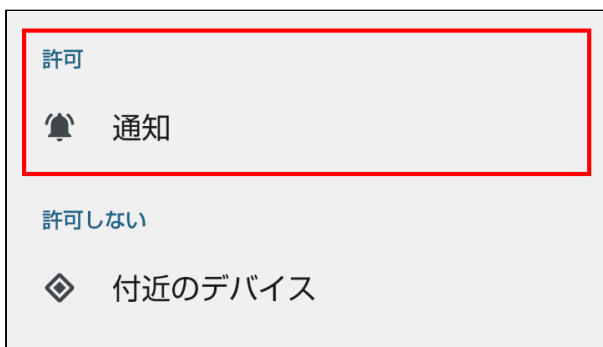

2. アラート通知の設定を確認する

1. 設定を起動する

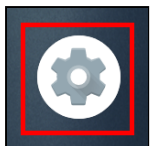

2. アプリを選択する



3. 「aams4」を選択する

4. 通知を選択する



5. 通知設定が下図のように全てONになっている事を確認



6. アラート通知を選択

7. アラート通知の設定が下図のように設定されている事を確認



アラート通知



アラート通知

aams

アラート通知を受信します

通知の表示



デフォルト

スマートフォンの設定に基づき、着信音またはバイブレーションが有効になります

サイレント

 **ポップアップ**
デバイスのロックが解除されているとき、画面上部にバナーとして通知を表示します 

 **音**
デフォルトの通知音

 **バイブレーション** 


 **ロック画面**
すべての通知の内容を表示する

 **通知ドットの表示** 

 **サイレントモードの例外**
サイレントモードが ON の場合もこの通知を引き続き表示します 

3. 接続状態を確認する

1. アプリを起動して接続中を確認する

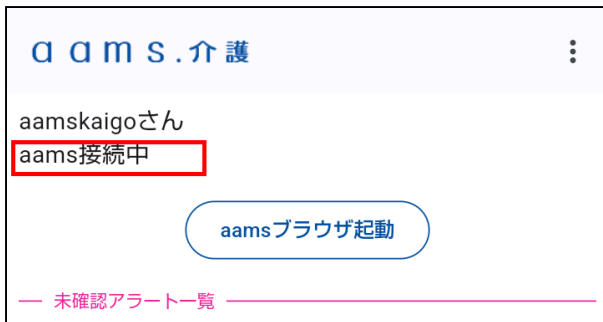

2. 通知から接続中を確認する



4. Wi-Fi設定を確認する

Wi-Fi接続がサーバーと同じネットワークに接続されているか確認する


アラート受信時、ロック画面が点灯しないと思ったら

ロック画面の通知設定を確認する


1. 設定を起動する




2. 「ディスプレイ」を選択

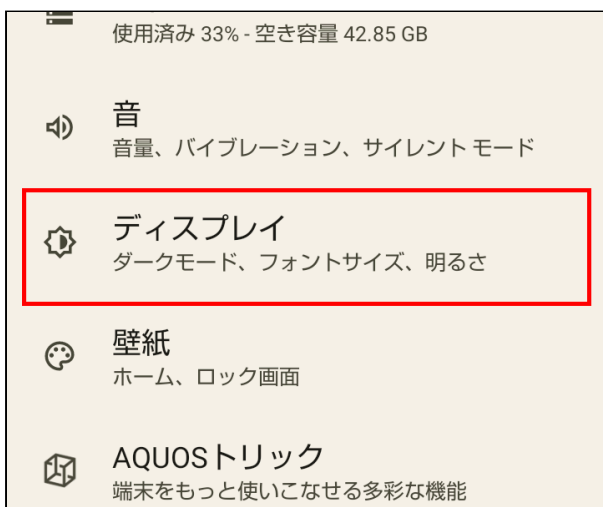

3. 「ロック画面」を選択

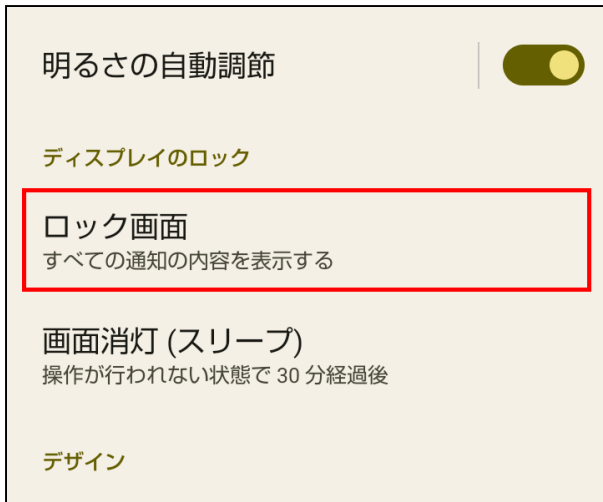


4. 「通知時にスリープ状態から復帰」をONにする

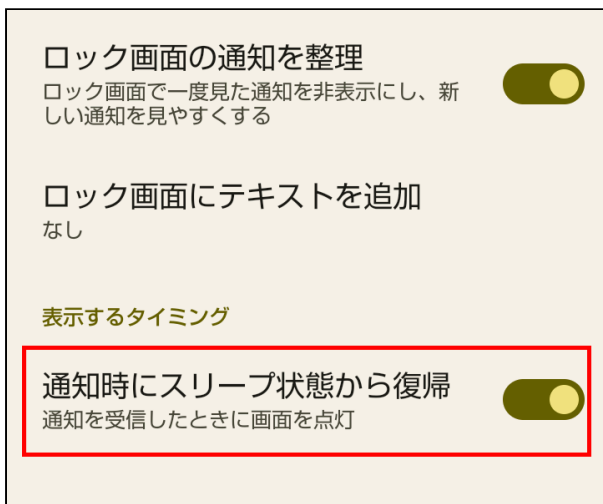

ブラウザ起動モードの選択

1. グループ選択画面上部のオプションメニューを選択します。

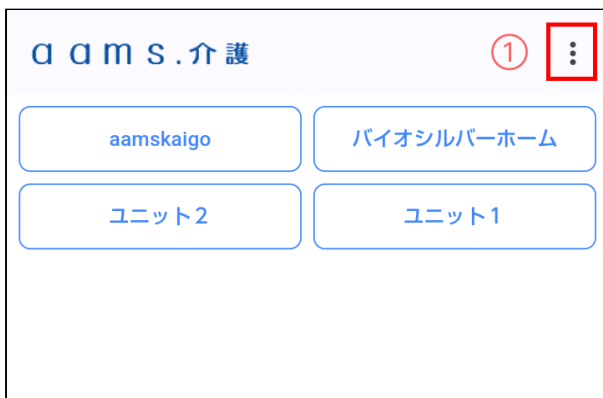

2. メニューから「起動ブラウザ設定」を選択する



3. 「デフォルトモード」、「独立モード」どちらかを選択する

モード	説明
デフォルト	アプリ標準で使用するモード(推奨)
独立	デフォルトブラウザに設定しているブラウザを aams4アプリと切り離して起動するモード

※デフォルトモードと独立モードでは操作性が異なります。

-
- 2024/05/27 アプリバージョン1.0.0 初版
 - 2024/06/14 アプリバージョン1.0.1 第2版
 - 2025/01/29 アプリバージョン1.0.4 第3版
 - 2026/04/28 アプリバージョン1.1.0 第4版